



TOITU FOSTERLJUDSDETEKTOR

FD-390


BÄRBAR MED DISPLAY

FD-390



FUNKTIONER

- Stabil och momentan FHR (fosterhjärtfrekvens) baserad på den autokorrelationsteknik som används för Toitu CTG-apparatur.
- Inbyggd ljudkontroll som automatiskt stänger av höga störningsljud.
- Laddningsbar med stor högtalare för god ljudkvalitet och överlägsen känslighet vid tidigare graviditeter.

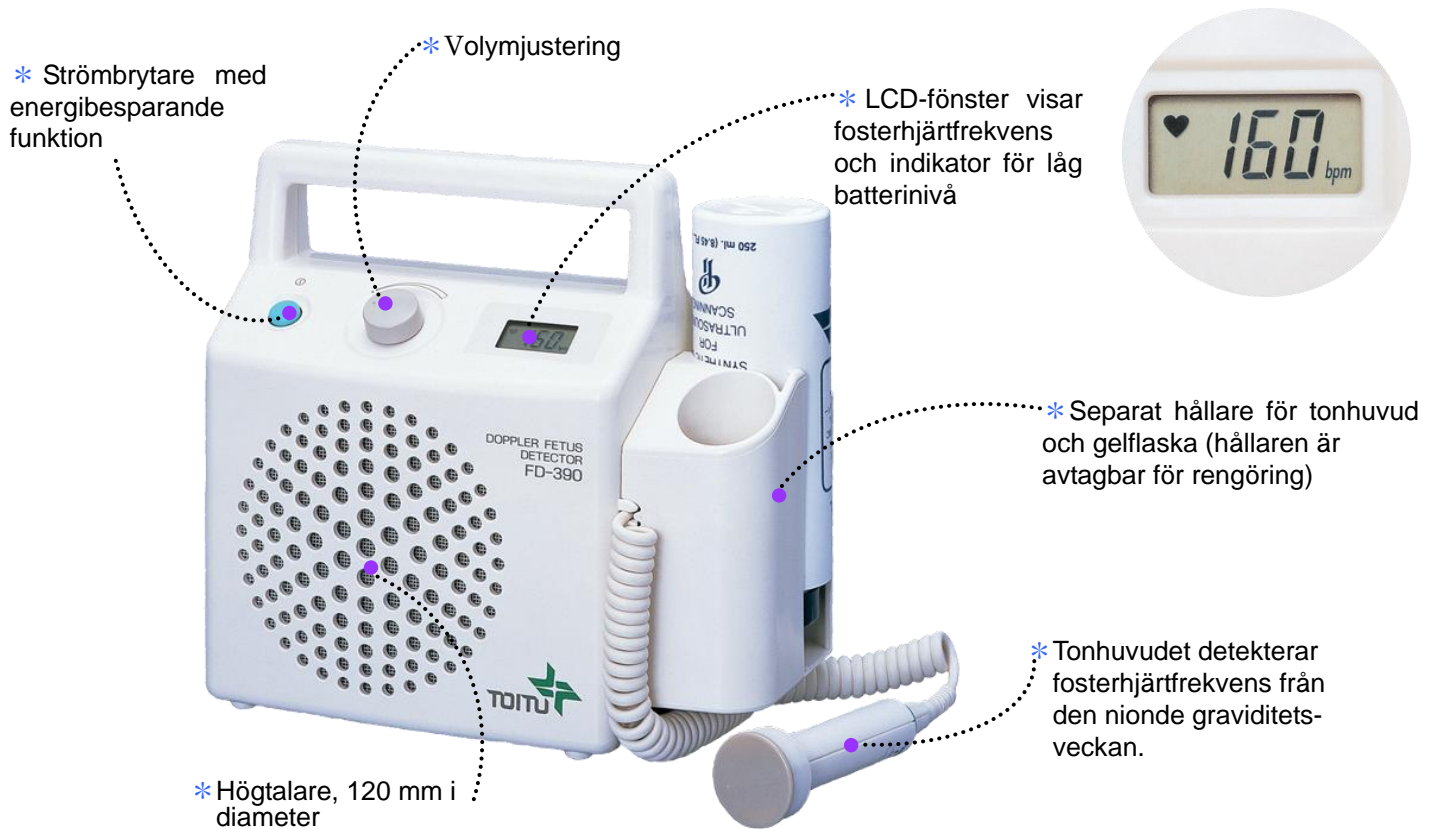

Specifikationer

Ultraljudsfrekvens	: 2.5MHz
Uteffekt ultraljud	: ≤10mW/cm
Mätområde fosterhjärtfrekvens	: 50-210 bpm
Uteffekt högtalare	: 1W
Högtalare	: 120mm i diameter
Nätspänning	: AC...voltage as specified, 50-60Hz, 9.5VA (25VA under laddning) eller DC...Inbyggt Nickel-hydrogen laddningsbart batteri Laddningstid: Cirka. 1,5 timme
Oavbruten drifttid batteri	: Cirka 5 timmar (utan signal)
Externa dimensioner	: 220(L)x210(H)x120(B)mm
Vikt	: Cirka 2,4 kg (inklusive batteri)

Standardtillbehör

Tonhuvud.....	1
Tonhuvudshållare.....	1
Nätsladd.....	1
Reservsäkring.....	2
Ultraljudsgel, 250ml.....	1

Extra tillbehör

Hörlurar

Kvalitetsstandard

Medical Device Directive (93/42/EEC)

CE
0 1 2 0

* Design och specifikationer kan komma att ändras utan föregående meddelande.

Distributör:

TOITU CO., LTD.



1-5-10, EBISU-NISHI, SHIBUYA-KU, TOKYO 150-0021 JAPAN

TEL:+81-3-3463-6381 FAX:+81-3-3496-1376

E-mail:international@toitu.co.jp

http://www.toitu.co.jp/e/

